



SINO EURO LEAD

DE Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um sich die Produkthanleitung durchzulesen. Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. Unsere Kontaktinformationen finden Sie unten auf dieser Seite. Eine ausführliche digitale Version der Anleitung und weitere Dokumente zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Webseite:

<https://www.sino-euro.de/documents>

EN Thank you for choosing our product! Please take a few minutes time to read through the product manual. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. You can find our contact information at the bottom of this page. Please visit our website to find the extended digital version of this manual and for further documents to our products:

<https://www.sino-euro.de/documents>



Website Link

Kurzanleitung / Compact user's Manual Community Maske / Community Mask BFL001

Produktangaben

Warenbezeichnung: Community Maske

Modellnummer: BFL001

Modell Typ: Typ I $\geq 95\%$, Mund Nasen Bedeckung (MNB) / Community Maske

Geprüft gemäß: EN 14683:2019+AC:2019

Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum

Packungsinhalt: 50 Masken BFL001

Bestandteile/Material: Maske - PP BFE Vliesstoffe, Nasebügel - Metall, Schlaufen - Gummi

Importeur Angaben

Sino Euro Lead UG

Gogolstr. 8

04357 Leipzig, Deutschland

Registergericht Leipzig: HRA 35015

Kontakt:

Tel.: +49(0)341 8626 5689, E-Mail: g.vartanjan@sino-euro.de

DE - Anwendungshinweise

1. Drehen Sie die Maske mit der hellen Seite zu sich und achten Sie vor dem Aufsetzen der Maske darauf, dass der Metall-Nasenbügel nach oben zeigt. An den beiden Seiten finden Sie die Gummischlaufen. Nehmen Sie diese in die Hände und ziehen Sie die Maske vorsichtig heran, sodass die Nase überdeckt ist.
2. Ziehen Sie die Gummischlaufen vorsichtig über Ihre Ohren. Vergewissern Sie sich, dass die Maske ordentlich und bequem auf der Nase aufsitzt.
3. Halten Sie die Maske mit einer Hand an der Nase in Position, während Sie mit der zweiten Hand die Unterseite der Maske vorsichtig über das Kinn ziehen. Fixieren Sie anschließend die Maske indem Sie die verstellbaren Metall-Nasenbügel an den Nasenrücken pressen.
4. Überprüfen Sie, ob die Maske richtig aufsitzt indem Sie beide Hände auf die Maske legen, damit diese nicht verrutscht. Atmen Sie tief ein und aus. Die Maske sollte sich leicht zusammenziehen und dann leicht aufblähen. Wenn Sie einen Luftaustritt an der Nase feststellen, muss der Nasenbügel stärker angedrückt werden. Prüfen Sie die Passgenauigkeit erneut und justieren Sie die Maske bei Bedarf nach.



1.



2.



3.



4.

EN - Instructions

1. Turn the mask with the white inner side towards you and make sure that the metal nose clip is facing upwards before putting on the mask. You will find the rubber loops on both sides. Take them with both hands and carefully pull the mask towards you. Please make sure the nose is covered first.
2. Gently pull the rubber loops over your ears. Make sure the mask fits properly and comfortably and covers your nose.
3. Hold the mask in place at your nose with one hand while carefully pulling the bottom of the mask over your chin with the other hand. Then fix the mask in place by pressing the adjustable metal nose clip onto the bridge of the nose.
4. Please make sure the mask is sitting correctly by placing both hands on the mask so that it does not slip. Take a deep breath in and out. The mask should contract slightly and then inflate slightly. If you notice an air leak at your nose, adjust the nasal clip. Doublecheck and readjust the mask if necessary.

Symbolerklärung / Explanation of symbols



Gebrauchsanweisung beachten
Pay attention to the manual



Nicht steril
Non sterile




Nicht zur Wiederverwendung
Disposable, not reusable




Vor Feuchtigkeit schützen. Maximale Lagerfeuchtigkeit 80%
Keep away from liquids. Maximum humidity 80%



Vor Lichteinstrahlung schützen
Keep away from light

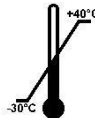

Lagertemperatur zwischen -30°C und +40°C
Storage temperature from -30°C to +40°C

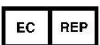

Bevollmächtigter/Repräsentant in der Europäischen Gemeinschaft
Authorized/Representative body in the European Community



Herstellungsdatum
Production date
Jan-2021



Im Restmüll entsorgen
Dispose with residual waste